

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-014580

(43)Date of publication of application : 20.01.1998

(51)Int.Cl.

C12N 15/09

C12N 9/10

// (C12N 15/09

C12R 1:07 )

(C12N 9/10

C12R 1:19 )

(21)Application number : 08-176231

(22)Date of filing : 05.07.1996

(71)Applicant : EZAKI GLICO CO LTD

(72)Inventor : TAKADA HIROKI  
TAKABA TAKESHI  
OKADA SHIGETAKA  
IMANAKA TADAYUKI

## (54) HEAT-RESISTANT PHOSPHORYLASE AND ITS PRODUCTION

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject new enzyme, a heat-resistant phosphorylase derived from *Bacillus stearothermophilus*, useful for antimicrobial agents for medical use, antitumor agents, therapeutic agents for cardiopathy, and for producing  $\alpha$ -glucan and the substrates for synthesizing  $\alpha$ -glucan.

SOLUTION: This enzyme is a new heat-resistant phosphorylase having the following characteristics: having variation(s) due to the deletion, substitution or addition of at least one amino acid in the amino acid sequence ranging from the 1st Met to the 798th Met in the sequence table shown by the formula; forming glucose-1-phosphate and  $\alpha$ -1,4-glucan through acting on starch; optimum temperature is 50°C; resistant to heat even at 60°C; and stable at pH6.5-11.

This enzyme is useful, for antimicrobial agents for medical use, antitumor agents (platinum complex), therapeutic agents for cardiopathy (amine salt), and for producing glucose-1-phosphate as a substrate for synthesizing  $\alpha$ -glucan. This new enzyme is obtained by subjecting the chromosome DNA of *Bacillus stearothermophilus* TRBE14 strain to PCR using a primer followed by expressing the resultant gene.

```

Met Leu Thr Asp Lys Glu Thr Phe Cys Glu Ala Phe Leu Thr Lys Arg
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480
 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660
 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680
 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940
 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960
 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980
 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040
 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060
 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080
 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100
 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120
 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140
 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160
 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180
 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200
 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220
 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240
 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260
 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280
 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300
 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320
 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340
 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360
 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380
 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420
 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440
 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460
 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480
 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500
 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520
 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540
 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560
 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580
 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600
 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620
 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640
 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660
 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680
 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700
 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720
 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740
 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760
 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780
 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800
 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820
 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840
 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900
 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060
 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080
 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100
 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120
 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140
 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160
 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180
 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200
 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220
 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240
 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260
 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280
 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300
 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320
 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340
 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360
 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380
 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400
 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420
 2421 2422 
```

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-14580

(43) 公開日 平成10年(1998) 1月20日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 1 2 N 15/09 9/10	Z N A	9282-4B	C 1 2 N 15/00 9/10	Z N A A
// (C 1 2 N 15/09 C 1 2 R 1:07) (C 1 2 N 9/10	Z N A			

審査請求 未請求 請求項の数21 O L (全 16 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願平8-176231	(71) 出願人	000000228 江崎グリコ株式会社 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6番5号
(22) 出願日	平成8年(1996) 7月5日	(72) 発明者	高田 洋樹 兵庫県神戸市須磨区清水台1番8号 1-813
		(72) 発明者	鷹羽 武史 兵庫県神戸市北区日の峰4-7-16
		(72) 発明者	岡田 茂孝 奈良県生駒市東生駒3丁目207-269
		(72) 発明者	今中 忠行 大阪府吹田市藤白台2丁目28番11号
		(74) 代理人	弁理士 山本 秀策

(54) 【発明の名称】 耐熱性ホスホリラーゼ、およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 耐熱性ホスホリラーゼを提供すること、およびそれを利用したグルコース-1-リン酸または $\alpha$ -グルカンの製造方法の確立

【解決手段】 耐熱性ホスホリラーゼをコードする遺伝子を単離し、高発現可能な発現ベクターに挿入し、大腸菌で発現させることにより、耐熱性ホスホリラーゼを単離する。単離は菌体抽出液を60℃で加熱処理し、遠心分離することにより簡単に行われる。耐熱性ホスホリラーゼを用いて60℃以上の温度で反応させることにより老化と雑菌汚染を伴わない、グルコース-1-リン酸および $\alpha$ -グルカンの製造方法が提供される。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ホスホリラーゼであって以下の性質：

1)基質特異性： $\alpha$ -1,4-グルカンまたはグルコース-1-リン酸；

2)至適温度：50℃；

3)耐熱性：60℃においても耐熱性であり；および

4)pH安定性：pH6.5～11；を有する、ホスホリラーゼ。

【請求項2】 配列表の配列番号1の1位のMetから798位のMetまでのアミノ酸配列を有する、請求項1に記載のホスホリラーゼ。

【請求項3】 配列表の配列番号1の1位のMetから798位のMetまでのアミノ酸配列中の1またはそれ以上のアミノ酸の欠失、置換、あるいは付加による変異を有するホスホリラーゼであって、該変異を含むホスホリラーゼが、該変異を含まないホスホリラーゼと同等またはそれ以上の比活性および耐熱性を有する、請求項1に記載のホスホリラーゼ。

【請求項4】 前記ホスホリラーゼが、バチルス ステアロサーモフィラスTRBE14株由来である、請求項1に記載のホスホリラーゼ。

【請求項5】 請求項2または3のいずれかの項に記載のホスホリラーゼであって、比活性が大腸菌ホスホリラーゼよりも高い、ホスホリラーゼ。

【請求項6】 前記比活性が大腸菌グリコーゲンホスホリラーゼの少なくとも9倍である、請求項2または3のいずれかの項に記載のホスホリラーゼ。

【請求項7】 配列表の配列番号1の1位のMetから798位のMetまでのアミノ酸配列をコードする配列を含む、ホスホリラーゼ遺伝子。

【請求項8】 前記ホスホリラーゼ遺伝子が配列表の配列番号4に記載のDNA配列である、ホスホリラーゼ遺伝子。

【請求項9】 配列表の配列番号1の1位のMetから798位のMetまでのアミノ酸配列中の1またはそれ以上のアミノ酸の欠失、置換、あるいは付加による変異を有するホスホリラーゼであって、該変異を含むホスホリラーゼが、該変異を含まないホスホリラーゼと同等またはそれ以上の比活性および耐熱性を有するホスホリラーゼをコードする遺伝子。

【請求項10】 配列表の配列番号2および3のプライマーのセットを用いてPCRにより増幅される、ホスホリラーゼ遺伝子を含むDNA。

【請求項11】 請求項7～10のいずれかの項に記載の耐熱性ホスホリラーゼ遺伝子を含む発現ベクター。

【請求項12】 請求項11に記載の発現ベクターで形質転換された微生物。

【請求項13】 前記微生物が原核生物である、請求項12に記載の形質転換微生物。

【請求項14】 前記微生物が中温菌である、請求項1

2に記載の形質転換微生物。

【請求項15】 前記原核生物が*Escherichia coli*である、請求項13に記載の形質転換微生物。

【請求項16】 請求項11に記載の形質転換された微生物を培養する工程、60℃以上に加熱する工程、および該培養により生産されたホスホリラーゼを回収、精製する工程を含む、耐熱性ホスホリラーゼの製造方法。

【請求項17】 前記形質転換された微生物が中温菌である、請求項16に記載の方法。

10 【請求項18】 前記形質転換された微生物が*Escherichia coli*である、請求項16に記載の方法。

【請求項19】 請求項16に記載の方法によって回収、精製されたホスホリラーゼ。

【請求項20】 請求項1ないし3のいずれかの項に記載のホスホリラーゼを用いて $\alpha$ -グルカンを加リン酸分解する工程を含む、グルコース-1-リン酸を生成する方法。

【請求項21】 糖類およびグルコース-1-リン酸を基質として、請求項1ないし3に記載のホスホリラーゼを作用させる工程を含む、 $\alpha$ -グルカンの合成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本願発明は、新規な耐熱性のホスホリラーゼ、このホスホリラーゼをコードする遺伝子、このホスホリラーゼを発現する発現ベクター、このホスホリラーゼの製造方法、および耐熱性のホスホリラーゼを用いるグルコース-1-リン酸ならびに $\alpha$ -グルカンの製造方法に関する。

【0002】

30 【従来の技術】ホスホリラーゼ(EC.2.4.1.1)は、馬鈴薯塊茎などの植物、ウサギ筋肉などの動物、酵母などの微生物等に広く分布していることが知られている。そしてホスホリラーゼは、医療用抗菌剤、抗腫瘍剤(白金錯体)、心臓病の治療薬(アミン塩)、および $\alpha$ -グルカン合成の基質として有用であるグルコース-1-リン酸(「G-1-P」とも略称される)を合成する際に有用な酵素である。

【0003】さらに、ホスホリラーゼは、アミロースなどの $\alpha$ -グルカンを合成する際にも有用である。例えば、図1に記載のように、ホスホリラーゼをグルコース-1-リン酸とマルトペンタオース等の糖類との混合物に作用させることによって、逆合成反応により $\alpha$ -グルカンが合成される。得られた $\alpha$ -グルカンは、サイクロアミロースをはじめとする有用糖質の合成の基質として使用されている。

【0004】グルコース-1-リン酸の製造、あるいは $\alpha$ -グルカンの製造には、おもに馬鈴薯由来のホスホリラーゼが用いられている。これは、比較的大量の酵素が得易いことによる。大腸菌(*Escherichia coli*)由来のホスホリラーゼも、その遺伝子が単離されていることから、大

【0005】 $\alpha$ -グルカン加工において工業的に酵素を使用する場合は、基質である $\alpha$ -グルカンの老化を抑制し、および雑菌汚染を防止するために、60°C以上で反応を行うことが望ましいとされている。しかし、これらの酵素は全て30°C~45°C程度の中温域で高い活性を有する酵素であり、60°C以上の高温には用いられない。例えば、大腸菌由来のホスホリラーゼ酵素の反応至適温度は30°Cであり(Weinhusel 糖質AEnzyme and Microbial Technology 17, 140-146 (1994))、馬鈴薯由来のホスホリラーゼ酵素の反応至適温度は40°Cであり(喜多ら、特開平2-231092)、およびウサギ筋肉由来のホスホリラーゼ酵素の反応至適温度は30°Cである(Nakataniら、J. Appl. Biochem. 5, 371-374 (1983))。最も反応至適温度の高いホスホリラーゼでも、その温度は高くとも45°C程度である(Weinhusel 糖質AApp. Microbiol, Biotechnol (1994) 41, 510-516)。

【0006】そのため、雑菌の汚染および $\alpha$ -グルカンの老化が生じ、グルコース-1-リン酸を効率よく製造できないという問題点は解決されていないままである。

【0007】また、ホスホリラーゼの逆反応を利用してアミロースなどの $\alpha$ -グルカンを作る場合にも、雑菌汚染や生産物である $\alpha$ -グルカンの老化を防止するために60°C以上の温度で反応を行うことが望ましい。

【0008】そこで、60°Cの反応温度においても、活性を有する耐熱性の酵素の単離が必要とされてきた。

【0009】ところで、大腸菌(以下、E.coliというところもある)は2種のホスホリラーゼを有し、それぞれ、マルトデキストリンホスホリラーゼ(MaIP)およびグリコーゲンホスホリラーゼ(GlqP)と呼ばれている。細菌のGlqPの比活性が他のホスホリラーゼに比べて極端に低いことは特徴的である。これは、増殖に不適切な条件下で蓄積したグリコーゲンを徐々に分解するため、細菌においては比活性の低いGlqPが必要とされるからであると考えられている(Yuら、J. Biol. Chem. 263, 13706-13711, 1988)。

【0010】バチルス属細菌においては、バチルス サチルス(Bacillus subtilis)からGlqP遺伝子と相同性を有する遺伝子が単離されている(Kielら、Mol. Microbiol. 11, 203-218, 1994)。この遺伝子はグリコーゲン生合成系遺伝子群の最後に存在していることが知られている(図2(a)を参照)が、大腸菌のMaIPに相当する遺伝子が存在するかどうかは明らかでない。

【0011】他方、バチルス属の微生物においては好熱性菌が存在する。しかし好熱菌において、図2(a)に示されるようなバチルス サチルスと同様のグリコーゲン生合成系遺伝子群が存在しているかどうかは不明であり、他属の好熱性細菌においても同様に、そのようなグリコーゲン生合成系遺伝子群が存在するかどうかについては、全く不明であった。

【0012】例えば、バチルス ステアロサーモフィラ

ス(Bacillus stearothermophilus)CU21株の場合には、そのグリコーゲン生合成系遺伝子群は挿入配列によって分断されており、機能していない(Kielら、DNA Seq. - J. DNA Seq. Map. 4, 1-9, 1993)。またバチルス ステアロサーモフィラス1503-4R var. 4株では、グリコーゲン生合成系に属する遺伝子であるブランチングエンザイム遺伝子が単離されているが、その下流において意味のある塩基配列は現在のところ発見されていない(Kielら、Mol. Gen. Genet., 230, 136-144, 1991)。さらに、バチルス カルドリチカスではブランチングエンザイム遺伝子の下流に、図2(a)に示されるバチルス サチルスと同様なグリコーゲン生合成系遺伝子群と良く似た遺伝子の1部が存在することが発見されたが、ホスホリラーゼ遺伝子が存在するかどうかは不明である(Kielら、Seq. - J. DNA Seq. Map. 3, 1-9, 1992)。

【0013】そのさらに下流にホスホリラーゼ遺伝子が存在したとしても、バチルス ステアロサーモフィラスCU21株の例から考えられるように、ホスホリラーゼ遺伝子が分断されている可能性がある。またブランチングエンザイム自身に耐熱性がない(Kielら、Seq. - J. DNA Seq. Map. 3, 1-9, 1992)ため、ホスホリラーゼ遺伝子が完全な形で存在したとしても、そのホスホリラーゼが耐熱性を有するかどうかは不明であった。

【0014】さらに、大腸菌において、GlqPはグリコーゲン合成自体には不要であるとされているため、グリコーゲンを合成する好熱菌においてもバチルス サチルスのようなホスホリラーゼを有するグリコーゲン生合成系遺伝子群が存在するかどうかは不明であった。またホスホリラーゼが得られたとしても、大腸菌の場合のように極端に比活性が低い可能性が考えられた。

【0015】従って、耐熱性のホスホリラーゼが産業的にも必要とされていたにもかかわらず、その存在は不明であり、そしてこの耐熱性酵素の単離は、当業者の課題であった。

【0016】

【発明が解決しようとする課題】本願発明は上記の問題を解決するためのものであり、その目的とするところは：

(1) 耐熱性ホスホリラーゼをコードする遺伝子を単離すること；

(2) 高発現可能な発現ベクターに挿入したものを、微生物などの適切な宿主に導入することにより、上記ホスホリラーゼを生産する組換え体を得ること；

(3) 本酵素遺伝子が大腸菌などの中温菌を宿主として発現させることによって、耐熱性ホスホリラーゼを含む得られた菌体抽出液を60°Cで加熱処理することにより、夾雑酵素を簡単に除き得、精製の面においても有利であるような、ホスホリラーゼ酵素の製造方法を確立すること；あるいは

(4) 耐熱性ホスホリラーゼを用い、高い温度で反応さ

せることにより従来の問題点を克服するグルコース-1-リン酸あるいは $\alpha$ -グルカンの製造方法を確立することにある。

【0017】

【課題を解決するための手段】本願発明のホスホリラーゼは、基質特異性として $\alpha$ -1,4-グルカンを分解してグルコース-1-リン酸を生成する作用を有し、至適温度が50°Cであり、60°Cにおいても耐熱性であり、pH6.5~11の範囲で安定である性質を含む。

【0018】好ましい実施態様においては、配列表の配列番号1の1位のMetから798位のMetまでのアミノ酸配列を有する。

【0019】好ましい実施態様においては、配列表の配列番号1の1位のMetから798位のMetまでのアミノ酸配列中の1またはそれ以上のアミノ酸の欠失、置換、あるいは付加による変異を有するホスホリラーゼであって、該変異を含むホスホリラーゼが、該変異を含まないホスホリラーゼと同等またはそれ以上の比活性および耐熱性を有する。

【0020】好ましい実施態様においては、前記ホスホリラーゼが、バチルス ステアロサーモフィラスTRBE14株由来である。

【0021】好ましい実施態様においては、大腸菌ホスホリラーゼよりも高い比活性を有する。

【0022】好ましい実施態様においては、前記比活性が大腸菌グリコーゲンホスホリラーゼの少なくとも9倍である。

【0023】また、本願発明は、配列表の配列番号1の1位のMetから798位のMetまでのアミノ酸配列をコードするホスホリラーゼ遺伝子に関する。

【0024】好ましい実施態様においては、ホスホリラーゼ遺伝子は配列表の配列番号4に記載のDNA配列である。

【0025】好ましい実施態様においては、配列表の配列番号1の1位のMetから798位のMetまでのアミノ酸配列中の1またはそれ以上のアミノ酸の欠失、置換、あるいは付加による変異を有するホスホリラーゼであって、該変異を含むホスホリラーゼが、該変異を含まないホスホリラーゼと同等またはそれ以上の比活性および耐熱性を有する、ホスホリラーゼ遺伝子である。

【0026】好ましい実施態様においては、本願発明のヌクレオチド配列は配列表の配列番号2および3のプライマーのセットを用いてPCRにより増幅され得る。

【0027】さらに本願発明は、耐熱性ホスホリラーゼ遺伝子を含有する発現ベクターに関する。

【0028】また、本願発明は、発現ベクターで形質転換された微生物に関する。

【0029】好ましい実施態様においては、前記微生物は中温菌である。

【0030】好ましい実施態様においては、前記微生物

が原核生物である。

【0031】好ましい実施態様においては、前記原核生物は*Escherichia coli*である。

【0032】さらに本願発明は、形質転換された微生物を培養する工程、60°C以上に加熱する工程、および該培養により生産されるホスホリラーゼを回収、精製する工程を含む、耐熱性ホスホリラーゼの製造方法に関する。

【0033】好ましい実施態様においては、前記形質転換された微生物は中温菌である。

【0034】好ましい実施態様においては、前記形質転換された微生物は*Escherichia coli*である。

【0035】本願発明は、回収、精製されたホスホリラーゼに関する。

【0036】好ましい実施態様においては、回収、精製された耐熱性ホスホリラーゼは、至適温度が50°Cであり、60°Cにおいても耐熱性であり、pH6.5~11の範囲で安定である性質を含む。

【0037】また本願発明は、無機リン酸またはグルコース-1-リン酸で安定化される、ホスホリラーゼに関する。

【0038】好ましい実施態様においては、本願発明のホスホリラーゼは、60mMのグルコース-1-リン酸の存在下では70°Cで30分間加熱した後も約50%活性が残存する。

【0039】好ましい実施態様においては、1Mリン酸存在下において60°Cで $\alpha$ -グルカン分解反応を行った場合、1時間後も反応速度の低下が見られない。

【0040】好ましい実施態様においては、前記ホスホリラーゼは大腸菌ホスホリラーゼよりも高い比活性を有する。

【0041】好ましい実施態様においては、本願発明のホスホリラーゼの前記比活性は大腸菌のグリコーゲンホスホリラーゼの少なくとも9倍である。

【0042】本願発明は、また耐熱性ホスホリラーゼを用いて $\alpha$ -グルカンを加リン酸分解することにより、グルコース-1-リン酸を製造する方法に関する。

【0043】また、本願発明は、糖類およびグルコース-1-リン酸を基質として、請求項1ないし3に記載のホスホリラーゼを作用させる工程を含む、 $\alpha$ -グルカンの合成方法に関する。

【0044】好ましい実施態様においては、前記ホスホリラーゼを、60°Cより高い温度で反応させることにより生成する $\alpha$ -グルカンの沈澱、および雑菌汚染を防止して生成物である $\alpha$ -グルカンの老化を防止する。

【0045】好ましい実施態様においては、前記 $\alpha$ -グルカンはアミロースである。

【0046】

【発明の実施の形態】以下、本願発明を詳しく説明する。

【0047】本願発明において「好熱性菌」とは、生育至

適温度が50℃～105℃で、30℃以下ではほとんど増殖しない微生物を意味し、このうち90℃以上の至適温度を持つ微生物を超好熱性菌と定義する。

【0048】本願発明において、「中温菌」とは、生育温度が通常の温度環境にある微生物のことであり、特に最適生育温度が20℃～40℃である微生物をいう。

【0049】本願発明において、「60℃においても耐熱性がある」とは、0.1M 3-モルホリノプロパンスルホン酸(MOPS)の緩衝液(pH7.0)中で60mMのグルコース-1-リン酸が存在する条件下、60℃で30分処理したときに80%以上

の活性が残存することをいう。  
【0050】本願発明において「pH6.5～11の範囲で安定である」とは、図5に記載のそれぞれの緩衝液(50mM)中における各pHで40℃の条件下、40分間処理したときに95%以上の活性が残存することをいう。

【0051】本願発明において「ホスホリラーゼ活性」は、100mM MOPS(pH7.0)、45mMグルコース-1-リン酸、1%(w/v)可溶性からなる $\alpha$ -グルカン組成液中で、ホスホリラーゼを、40℃で30分間、作用させたときに生じる無機リン酸を定量することによって、測定される。1分間に1 $\mu$ モルの無機リン酸を生じる活性を1ユニットとする。

【0052】本願発明において「 $\alpha$ -グルカン」とは、 $\alpha$ -1,4-グルカンのことであり、デンプン、アミロース、グリコーゲンなどを含む。

【0053】本願発明は、配列表の配列番号1で示されるアミノ酸配列、あるいは配列表の配列番号1で示されるアミノ酸配列中の1またはそれ以上のアミノ酸の欠失、置換、あるいは付加により変異を含むホスホリラーゼであって、この変異を含むホスホリラーゼが変異を含まないホスホリラーゼと同等またはそれ以上の活性および耐熱性を有するホスホリラーゼである。このような変異は、天然に生じるか、あるいは変異原物質の作用または人為的に部位特異的突然変異導入を用いて生じさせ得る。また変異の導入の結果、変異を含まないホスホリラーゼと同等またはそれ以上の活性および耐熱性を有し得る。

【0054】組換えによる生産能力の向上は、目的遺伝子のクローン化およびクローン化された遺伝子の発現により達成される。

【0055】耐熱性のあるホスホリラーゼ遺伝子はバチルス ステアロサーモフィラスTRBE14株のブランディングエンザイム遺伝子の配列(Takataら、Appl. Environ. Microbiol. 60, 3096-3104, 1994)をもとに、染色体DNAからIPCR法(「細胞工学別冊植物細胞工学シリーズ2 植物のPCR実験プロトコル、秀蘭社」を参照のこと)を用いて順次下流側に存在するDNAフラグメントを取得することにより、得られ得る。さらに、このDNAフラグメントの塩基配列を基に合成されたプライマーを用い、バチルス

型に、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を用いて直接ホスホリラーゼ遺伝子を増幅し得る。

【0056】なお、バチルス ステアロサーモフィラスTRBE14株は工業技術院に受託番号FERM P-13916として寄託されている。

【0057】クローン化された遺伝子の配列は、クローン化DNAを挿入した適切なベクターの構築、発現ベクターの微生物への導入、ならびに組換え微生物の培養および生産物の回収により達成される。これらの方法は、当業者に周知である。

【0058】本願発明に用いられる宿主微生物には、原核生物および真核生物が含まれ、中温菌が好ましい。特に好ましい微生物としては、例えば大腸菌などが挙げられるが、これに限定されない。

【0059】発現ベクターは、目的の遺伝子が転写および翻訳されるように作動可能に連結されており、さらに必要に応じて微生物内での複製および組換え体の選択に必要な因子を備えた媒体をいう。また、発現産物の分泌生産が意図される場合は、分泌シグナルペプチドをコードする塩基配列が、目的のタンパク質をコードするDNAの上流に正しいリーディングフレームで結合される。発現ベクターの種類が使用する微生物宿主に応じて代わり得ることは、当業者に周知である。

【0060】好ましい発現ベクターとしては、大腸菌中でも発現可能なpTrc99A(ファルマシア製)などが挙げられる。

【0061】上記発現ベクター内の転写および翻訳に必要な因子に作動可能に連結するために、目的のホスホリラーゼ遺伝子を加工しなければならない場合がある。これらは例えばプロモーターとコード領域との間が長すぎて転写効率の低下が予想される場合、またはリボソーム結合部位と翻訳開始コドンとの間隔が適切でない場合などである。加工の手段としては、制限酵素による消化、Bcl31、ExoIIIなどのエキソヌクレアーゼによる消化、あるいはM13などの一本鎖DNAまたはPCRを使用した部位特異的突然変異の導入が挙げられる。

【0062】発現ベクターを導入してホスホリラーゼ生産能力を獲得した形質転換株による目的遺伝子の生産は、使用する宿主微生物および発現ベクター内の発現を調節する因子の種類、ならびに発現される物質に応じて適切な条件が選択される。例えば、通常の振とう培養方法が用いられ得る。

【0063】用いる培地は、使用される宿主微生物が生育するものであれば特に限定されない。

【0064】培地には炭素源、窒素源の他、無機塩、例えば、リン酸、Mg<sup>2+</sup>、Ca<sup>2+</sup>、Mn<sup>2+</sup>、Fe<sup>3+</sup>、Fe<sup>2+</sup>、Zn<sup>2+</sup>、Co<sup>2+</sup>、Ni<sup>2+</sup>、Na<sup>+</sup>、K<sup>+</sup>等の塩が必要に応じて、適宜混合して、または単独で用いられ得る。また、必要に応じて形質転換体の生育、酵素の生産に必要な各種無機物、有機物が添加され得る。

【0065】培養の温度は用いる形質転換体の生育に適した温度を選択し得る。通常15℃～60℃である。本願発明の好ましい実施態様において中温菌を使用する場合、25℃～40℃での培養が好ましい。また、形質転換株の培養は、ホスホリラーゼの生産のために十分な時間続行されるが、本願発明の好ましい実施態様では、培養時間は24時間程度である。

【0066】誘導性のプロモーターを有する発現ベクターを使用する場合は、誘導物質の添加、培養温度の変更、培地成分の調整などにより発現が制御され得る。例えば、ラクトース誘導性プロモーターを有する発現ベクターを使用する場合は、イソプロピル-β-D-チオガラクトピラノシド(IPTG)を添加することにより発現が誘導され得る。

【0067】このようにして培養した後、例えば培養物を遠心分離または濾過することによって形質転換体を分離して上清を得る。次に、このホスホリラーゼを含む上清を通常的手段(例えば、塩析法、溶媒沈澱、限外濾過)を用いて濃縮し、ホスホリラーゼを含む画分を得る。この画分を濾過、あるいは遠心分離、脱塩処理などの処理を行い粗酵素液を得る。さらにこの粗酵素液を、凍結乾燥、等電点電気泳動、イオン交換クロマトグラフィー、晶出などの通常の酵素の精製手段を適宜組み合わせることによって、比活性の向上した粗酵素あるいは精製酵素が得られる。α-アミラーゼ等のα-グルカン分解する酵素、およびホスファターゼ等のグルコース-1-リン酸を分解する酵素が含まれていなければ、その粗酵素がそのまま以後の反応に用いられ得る。

【0068】本願発明の耐熱性ホスホリラーゼ遺伝子が大腸菌などの中温菌で発現させた場合、ホスホリラーゼは簡単に精製され得る。簡単に述べると、ホスホリラーゼを含む菌体抽出液を60℃で加熱処理することにより、夾雑酵素が不溶化する。この不溶化物を遠心分離などで除去して透析処理を行えばよい。

【0069】精製された耐熱性ホスホリラーゼを用いてα-グルカン分解しグルコース-1-リン酸を生産し得る。この際、ホスホリラーゼを、固定化酵素としても使用し得る。

【0070】反応温度は40℃以上、好ましくは50℃～70℃、特に好ましくは60℃であり、このことにより、基質であるα-グルカンの老化および雑菌汚染が防止され得る。

【0071】グルコース-1-リン酸の生産は、無機リン酸溶液を含むα-グルカン溶液中で、本願発明のホスホリラーゼを作用させることにより行い得る。

【0072】ホスホリラーゼは、α-グルカンの非還元末端からグルカンを加リン酸分解してグルコース-1-リン酸を生成するが、α-1,6-グルコシル結合が基質に存在する場合、その4残基手前で過リン酸分解反応が停止する。従って、α-グルカンから効率よくグルコース-1-

リン酸の生産を行う場合、予めα-1,6-結合を切断しておくか、またはホスホリラーゼ反応と同時にα-1,6-結合を切断する酵素を添加し得る。例えば、コーンスターチのα-1,6-結合を切断した短鎖長アミロースが用いられ得る。短鎖長アミロースを使用する場合、ホスホリラーゼによる加リン酸分解は、マルトテトラオースを残して停止するため、グルコース-1-リン酸の理論的限界収率は78%である。

【0073】本願発明のホスホリラーゼは、α-グルカンの分解のみならず、生成にも用いられ得る。この際、ホスホリラーゼを、固定化酵素としても使用し得る。

【0074】反応温度は40℃以上、好ましくは50℃～70℃、特に好ましくは60～70℃であり、このことにより、雑菌汚染が防止され得る。

【0075】本願発明のホスホリラーゼの基質として使用され得る糖類は、非還元末端を有する重合度4以上のα-グルカンである。

【0076】糖類を基質として反応させる場合、生じるα-グルカンの分子量は、例えば下記の反応式と式(1)とを用いて算出し得る。

【0077】

反応式:  $nG-1-P + G(5) \rightarrow nPi + G(5+n)$

ここで、G-1-Pはグルコース-1-リン酸であり、G(5)はマルトペンタオース(5は重合度を表す)であり、G(5+n)は生じるアミロース(5+nは重合度を表す)である。

【0078】式(1): 生成物の平均重合度 = (生じるリン酸のモル数/初発マルトペンタオロースのモル数) + 5

α-グルカンの生産は、例えば終濃度0.1mMのマルトペンタオースを反応プライマーとして含むクエン酸緩衝液(pH7.0)中で、グルコース-1-リン酸にホスホリラーゼを作用させることにより行い得る。本願発明のホスホリラーゼを用いた場合、長時間十分に反応が進行し、また生成物の沈澱も生じない。

【0079】反応液中のpHにより、またはホスホリラーゼの起源により若干変動があるが、反応の平衡に達する場合、グルコース-1-リン酸とリン酸との濃度比が1:3.6～4.5の濃度比になる(Fletcher, R.J., Ann. Rev. Biochem. 1980 49, 31-61; およびWeinhouseら, Enzyme and Microbial Technology 1994 17, 140-146)。本願発明のホスホリラーゼにおいても、この比はほぼ上述のようである。従って、グルコース-1-リン酸とリン酸との濃度比により、ホスホリラーゼを合成反応または分解反応のいずれかに作用させるかを調節することが可能である。

【0080】

【実施例】以下に具体的に実施例を用いて説明するが、本願発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0081】(実施例1) 耐熱性ホスホリラーゼ遺伝子の単離、および耐熱性ホスホリラーゼ発現用プラスミド



の作製)

#### (1) ホスホリラーゼ遺伝子の単離

目的の遺伝子である耐熱性のあるホスホリラーゼ遺伝子のクローン化のために、本願発明者らは、バチルス ステアロサーモフィラス TRBE14 株のブランチングエンザイム遺伝子の配列 (Takata ら, Appl. Environ. Microbiol. 60, 3096-3104, 1994) をもとに、染色体 DNA から PCR 法 (「細胞工学別冊植物細胞工学シリーズ2 植物のPCR実験プロトコル、秀蘭社」を参照) を用いて順次下流側に存在する DNA フラグメントを取得した。その DNA 領域の模式図を図 2 (b) に示す。塩基配列解析の結果図 2 (b) に示した位置にホスホリラーゼ遺伝子がコードされていることが明らかとなった。結果的にバチルス サチルス のグリコーゲン生合成系遺伝子群の構造と良く似ていたが、各遺伝子の相同性は 60% 前後であり、オーバーラップの度合いも微妙に異なっていた。また、グリコーゲン生合成系遺伝子群のさらに上流の構造は全く異なっていた。従って、バチルス サチルス がホスホリラーゼ遺伝子を含むグリコーゲン生合成系遺伝子群を有している事実から、直ちにバチルス ステアロサーモフィラス が同様のグリコーゲン生合成系遺伝子群を有するとの想像はできないことが、当業者に理解される。

#### 【0082】(2) 耐熱性ホスホリラーゼ遺伝子のクローン化

配列表の配列番号 1 に示した塩基配列に基づいて、オリゴヌクレオチド、プライマー-N (配列番号 2)、プライマー-C (配列番号 3) を合成した。20 pmol のプライマー-N、20 pmol のプライマー-C、0.2  $\mu$ g のバチルス ステアロサーモフィラス TRBE14 株染色体 (GENOME DNA ISOLATION KIT (BIO101 社製) を用いて調製)、Ex-Taq DNA ポリメラーゼ (宝酒造製) を 0.5 ユニット、10 ml の  $\times 10$  反応用緩衝液、各 2.0 nmol のデオキシ NTP を含む反応液 100  $\mu$ l を用いてポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) を実施した。PCR は、94°C、1 分間の加熱の後、98°C 20 秒、53°C 1 分、68°C 2 分のサイクルを 30 回繰り返し、最後に、72°C で 10 分加熱する条件で実施した。その結果、耐熱性ホスホリラーゼ遺伝子を含む約 2.5 kbp の DNA フラグメントが増幅された。この DNA フラグメントを制限酵素、EcoRI と PstI で切断した後、アガロースゲル電気泳動で精製し、ベクター pTrc99A (ファルマシア製) の同制限酵素切断点に組み込み、耐熱性ホスホリラーゼ発現用プラスミド pTGP91 を得た。

【0083】(実施例 2：耐熱性ホスホリラーゼの活性測定) 活性は、グルコース-1-リン酸と  $\alpha$ -グルカンに反応させたときに生じる無機リン酸を Saheki らの方法 (Anal. Biochem. 148, 277-281 (1985)) で定量することにより、以下のように測定した。100 mM MOPS (pH 7.0)、45 mM グルコース-1-リン酸、1% (w/v) 可溶性デンプンの組成からなる反応液 (200  $\mu$ l) を、40°C で 30 分間保温した後、

酸アンモニウム (pH 5.0) を添加し、反応を停止した。これにアスコルビン酸溶液 (溶液中の 10% アスコルビン酸 (pH 5)) を 200  $\mu$ l 添加し、30°C で 15 分間保温した後、850 nm の吸光度を測定した。1 分間に 1  $\mu$ mol のリン酸を遊離する酵素量を 1 ユニットとし、活性のユニットを算出した。

#### 【0084】(実施例 3：耐熱性ホスホリラーゼの精製)

プラスミド pTGP91 を含有する大腸菌 TG-1 株の全培養液 10 ミリリットルを、1 リットルの L 培地 (50  $\mu$ g/ml アンピシリンを含む) を含む 2 リットル容坂口フラスコに添加し、37°C で振とうした。2.5 時間後、終濃度 1 mM のイソプロピル- $\beta$ -D-チオガラクトピラノシドおよび 1 mM のピリドキシンを添加し、さらに 21.5 時間 37°C で培養を続けた。菌体を遠心分離により集め、20 mM Tris-HCl (pH 7.5) (以下、緩衝液 A という) で洗浄した後、同緩衝液に再び懸濁して、超音波処理を行った。これを、遠心分離して上清を粗酵素液とした。粗酵素液を 60°C で 1 時間処理して不溶物を除き緩衝液 A に対して透析した。透析内液を緩衝液 A で平衡化した Q-セファロースカラム (ファルマシア製) にロードして、100 mM NaCl を含む緩衝液 A で洗浄した。耐熱性ホスホリラーゼは、500 mM NaCl を含む緩衝液で溶出した。

【0085】得られた酵素液に終濃度 300 mM になるように、硫酸アンモニウムを添加した後、300 mM 硫酸アンモニウムを含む緩衝液 A で平衡化したフェニルトヨパールカラム (TOSQ 製) にロードした。150 mM 硫酸アンモニウムを含む緩衝液 A で洗浄した後、緩衝液 A で耐熱性ホスホリラーゼを溶出した。これを、緩衝液 A で平衡化した Source15Q カラム (ファルマシア製) にロードし、緩衝液 A 中の NaCl 濃度を 100 mM から 500 mM に変化させることによって酵素を溶出した。

【0086】得られた酵素液に終濃度 300 mM になるように、硫酸アンモニウムを添加した後、300 mM 硫酸アンモニウムを含む緩衝液 A で平衡化した Resource Phe カラム (ファルマシア製) にロードし、緩衝液 A で洗浄し、耐熱性ホスホリラーゼを蒸留水を流すことにより溶出した。得られた酵素液に終濃度 20 mM になるように Tris-HCl (pH 7.0) 緩衝液を添加し、精製酵素液とした。精製酵素は SDS ポリアクリルアミドゲル電気泳動で単一バンドを示した (図 3)。

【0087】(実施例 4：耐熱性ホスホリラーゼの比活性) 実施例 3 で精製した耐熱性ホスホリラーゼを用いて、本酵素の比活性を測定した。比活性は 1.82 ユニット/mg であった。実施例 2 で示した方法において、可溶性デンプンをグリコーゲン (ウサギ肝臓由来、ペーリンガーマンハイム製) に置換して測定した場合には 3.45 ユニット/mg であった。この比活性は、大腸菌グリコーゲンホスホリラーゼの比活性 (0.19 ユニット/mg, Yu ら, J. Biol. Chem. 263, 13706-13711, 1988) に比べると約 9 ~ 18 倍であった。

【0088】(実施例5: 耐熱性ホスホリラーゼの性質) 実施例3で精製した耐熱性ホスホリラーゼの本酵素の酵素学的性質を、当業者に周知の方法を用いて分析した。本酵素の反応至適pHは6.5~7であり(図4)、pH6.5~11.0の範囲で安定であった(図5)。また、反応至適温度は50℃であり(図6)、45℃まで安定であった(図7)。さらに、本酵素は無機リン酸やグルコース-1-リン酸で安定化された。例えば、60mMのグルコース-1-リン酸存在下では70℃、30分間の加熱後も約50%の活性が残存した。また1Mリン酸存在下において60℃で反応を行ったところ、1時間後も反応速度の低下は観察されなかった。

【0089】(実施例6: グルコース-1-リン酸の生産) 50mgのモチトウモロコシデンプンを10mlの1Mリン酸カリウム緩衝液(pH7.0)に懸濁し、沸騰水浴中で20分間加熱することによって溶解させた。これを、60℃まで冷却し、実施例3で精製した耐熱性ホスホリラーゼを0.13ユニット添加した。経時的にサンプリングし、グルコース-1-リン酸を定量した。グルコース-1-リン酸の定量は、Weinhauseの糖質AEnzyme and Microbial Technology 17, 140-146 (1994) に記述される酵素的方法に本質的に従い、以下のように実施した。


【0090】80μlのサンプルに80μlの1M Tris-HCl(pH7)、50mM MgCl<sub>2</sub>と640μlの蒸留水を添加した。これに、400μlの検出用試薬溶液(10mM Tris-HCl(pH7)、1.8μmol/ml NAD<sup>+</sup>、30nmol/ml グルコース-1,6-ジホスフェート、6ユニット/mlホスホグルコムターゼ(ウサギ筋肉由来、ベーリンガーマンハイム社製)、6ユニット/ml グルコース-6-ホスフェートデヒドロゲナーゼ(Leuconostoc mesenteroides由来、ベーリンガーマンハイム社製))を添加し、37℃で30分間保温した後、340nmの吸光度を測定した。

【0091】この結果、反応2時間後まで、ほぼ直線的にグルコース-1-リン酸が増加し、最終的に14mMに達した(図8)。このときのデンプン分解率は約45.3%であった。ホスホリラーゼはα-グルカンの非還元末端から作用し、α-1,6-グルコシド結合の4残基手前で反応が停止するので、本実験では分解反応はほぼ完全に終了していると判断した。

【0092】(実施例7: アミロースの生産) 実施例3で調製した耐熱性ホスホリラーゼと終濃度250mM または400mMのグルコース-1-リン酸とを60℃で反応させた。反応は10mMのクエン酸緩衝液(pH7.0)中で行い、酵素濃度は0.85ユニット/mlであり、終濃度の0.1mMのマルトペンタオースを反応プライマーとして用いた。経時的にサンプリングし、100℃で5分間加熱した後、前述のSahelらの方法により生じたリン酸を定量した。生じるアミ

ロースの分子量は、下の反応式を式(1)とを用いることによって、算出した。

【0093】

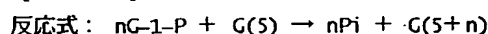

ここで、G-1-Pはグルコース-1-リン酸であり、G(5)はマルトペンタオース(5は重合度を表す)であり、G(5+n)は生じるアミロース(5+nは重合度を表す)である。

【0094】式(1): 生成物の平均重合度 = (生じるリン酸のモル数 / 初発マルトペンタオロースのモル数) + 5

反応の経時経過を図9に示す。60℃でも長時間十分に反応は進行し、生成物の沈澱も生じなかった。24時間後の反応液をゲル濾過クロマトグラフィー(Superose6+ Superdex30(Pharmacia製、1cm×30cm)、溶出液150mM NaCl、検出指示屈折計)にかけ、酵素合成アミロース(アジノキ社製)を基準として、重合度を算定した。その結果、グルコース濃度が250mMの場合、重合度261のアミロース、およびグルコース濃度が400mMの場合、重合度196のアミロースが生成されており、予想される大きさのアミロースが生成されたことが明らかとなった。

【0095】(実施例8: 短鎖長アミロースを基質としたグルコース-1-リン酸の生産) 実施例3で調製した耐熱性ホスホリラーゼを以下の反応液中で反応した。反応液組成は、0.2%または2%の短鎖長アミロース(ナカライテスク(株)製 AmyloseA (平均鎖長18)、コーンスターチのα-1,6結合を切断して乾燥した製品)、0.9Mリン酸カリウム、耐熱性ホスホリラーゼ0.04ユニット/ml(pH7.0)を含んだ。この反応液を60℃、65℃または70℃で18時間保温した後、終濃度0.8規定となるように水酸化ナトリウムを添加して反応を停止し、生じたグルコース-1-リン酸を実施例6と同様の方法で測定した。

【0096】また対照実験として、ウサギ筋肉ホスホリラーゼ(α型、Sigma社製)を用い、反応温度を30℃にした以外は同様の条件で行った。2%の基質濃度では反応初期(反応開始後、30分以内)に基質が沈澱を始め、反応が停止した。そのため、酵素を0.4ユニット/mlに増加し、反応温度を40℃として実験を行った。これらの結果を表1に示す。ホスホリラーゼによる加リン酸分解は、マルトテトラオースまでで止まるため、理論的限界収率は78%である。

【0097】後者の条件では、基質の沈澱は観測されなかったものの、耐熱性ホスホリラーゼを使用した場合のほうがグルコース-1-リン酸の収率が高くその値は、60℃、65℃および70℃において61%~68%であった(表1)。

【0098】

【表1】

	反応温度	酵素濃度	基質濃度	G-I-P量	G-I-P収率
	(℃)	(U/ml)	(%)	(μl)	(%)
ウサギ筋肉ホスホリラーゼ	30	0.04	0.2	0.088	0.71
ウサギ筋肉ホスホリラーゼ	30	0.04	2	1.84	1.49
ウサギ筋肉ホスホリラーゼ	40	0.4	0.2	6.33	51
ウサギ筋肉ホスホリラーゼ	40	0.4	2	67.1	54
耐熱性ホスホリラーゼ	60	0.04	0.2	8.31	67
耐熱性ホスホリラーゼ	60	0.04	2	83.9	68
耐熱性ホスホリラーゼ	65	0.04	0.2	7.80	63
耐熱性ホスホリラーゼ	65	0.04	2	79.0	64
耐熱性ホスホリラーゼ	70	0.04	0.2	7.50	61
耐熱性ホスホリラーゼ	70	0.04	2	79.2	64

【0099】

【発明の効果】本願発明の酵素は、今までに発見された中で最も耐熱性の高いホスホリラーゼであり、前述の実施例で示されるように、反応至適温度が50℃であり、60℃でも十分に使用し得る。また比活性も大腸菌グリコーゲンホスホリラーゼの少なくとも9倍である。従って、グルコース-1-リン酸を効率よく製造する際に問題となる、反応温度が低いために生じる雑菌の汚染およびα-グルカンの老化、またはホスホリラーゼの逆反応を利用してアミロースなどのα-グルカンを製造する際にも同様に問題となる、雑菌汚染や生産物であるα-グルカンの老化を、この耐熱性の酵素を使用することにより高い反応温度で行い得るようになり、克服することが可能となった。

\*【0100】さらに本酵素遺伝子を大腸菌などの中温菌を宿主として発現させた場合、耐熱性ホスホリラーゼを含む得られた菌体抽出液を60℃で加熱処理することにより、夾雑酵素を簡単に除去し得、精製の面においても有利であり得る。

【0101】

【配列表】

【0102】

【配列番号1】

配列の長さ：798

配列の型：アミノ酸

トポロジー：直鎖状

配列の種類：タンパク質

\*

配列

```

Met Phe Thr Asp Lys Glu Thr Phe Lys Gln Ala Phe Leu Ile Arg Leu
1           5           10          15
Glu Thr Leu Cys Gly Lys Gln Phe Glu Glu Ser Thr Thr Arg Asp His
                20          25          30
Tyr Tyr Val Leu Gly His Met Val Arg Glu His Ile Ser Arg His Trp
                35          40          45
Ile Ala Thr Asn Glu Arg Asn Arg Ala Gln Lys Arg Lys Gln Val Tyr
                50          55          60
Tyr Leu Ser Ile Glu Phe Leu Leu Gly Arg Leu Leu Gly Ser Asn Leu
65          70          75          80
Leu Asn Leu Gly Val Arg Gln Val Val Glu Glu Gly Leu Arg Asp Leu
                85          90          95
Gly Ile Arg Leu Glu Asp Val Glu Glu Ser Glu Ala Asp Ala Gly Leu
                100         105         110
Gly Asn Gly Gly Leu Gly Arg Leu Ala Ala Cys Phe Leu Asp Ser Leu
                115         120         125
Ala Thr Leu Asn Leu Pro Gly His Gly His Gly Ile Arg Tyr Lys His
                130         135         140
Gly Leu Phe Asp Gln Lys Ile Val Asp Gly Tyr Gln Val Glu Leu Pro
145          150          155          160
Gln Gln Trp Leu Arg His Gly Asn Val Trp Glu Ile Arg Lys Glu Glu
                165          170          175

```

17  
 Leu Ala Val Glu Val Asn Phe Trp Gly Lys Val Glu Val Tyr Glu Gln  
 180 185 190  
 Asn Gly Cys Leu Val Phe Arg His Ile Asp Ser Lys Lys Val Met Ala  
 195 200 205  
 Val Pro Tyr Asp Met Pro Val Ile Gly Tyr Gly Thr Asn Thr Val Asn  
 210 215 220  
 Thr Leu Arg Leu Trp Asn Ala Glu Pro Ala Lys Thr Phe Pro Leu His  
 225 230 235 240  
 Lys Asp Val Met Gln Tyr Lys Arg Glu Thr Glu Ala Ile Ser Glu Phe  
 245 250 255  
 Leu Tyr Pro Asp Asp Ala His Asp Glu Gly Lys Ile Leu Arg Leu Lys  
 260 265 270  
 Gln Gln Tyr Phe Leu Val Ala Ala Ser Leu Gly Ser Ile Val Arg Ala  
 275 280 285  
 His Arg Leu Gln His Gly Asn Leu His Gln Leu His Glu Tyr Val Ala  
 290 295 300  
 Ile His Val Asn Asp Thr His Pro Val Leu Ala Ile Pro Glu Leu Met  
 305 310 315 320  
 Arg Ile Leu Leu Asp Glu Glu Gly Met Ser Trp Glu Glu Ala Trp His  
 325 330 335  
 Ile Thr Thr His Thr Ile Ala Tyr Thr Asn His Thr Thr Leu Ser Glu  
 340 345 350  
 Arg Leu Arg Met Ala Ile His Leu Phe Gln Pro Leu Leu Pro Arg Ile  
 355 360 365  
 Tyr Met Ile Val Glu Glu Ile Asn Glu Arg Phe Cys Arg Glu Leu Trp  
 370 375 380  
 Glu Arg Tyr Pro Gly Asp Trp Gly Arg Ile Glu Gln Met Ala Ile Ile  
 385 390 395 400  
 Ala His Gly Val Val Lys Met Ala His Leu Ala Ile Ala Gly Ser His  
 405 410 415  
 Ser Val Asn Gly Val Ala Lys Leu His Thr Glu Ile Leu Lys Gln Arg  
 420 425 430  
 Glu Met Arg Leu Phe Tyr Glu Trp Ala Pro His Lys Phe Asn Asn Lys  
 435 440 445  
 Thr Asn Gly Val Thr His Arg Arg Trp Leu Leu Lys Ala Asn Pro Glu  
 450 455 460  
 Leu Ser Ala Leu Ile Thr Asp Thr Thr Gly Ser Arg Trp Ile His Glu  
 465 470 475 480  
 Pro Glu Thr Leu Ile Glu Leu Lys Pro His Ala Ser Asp Pro Ala Phe  
 485 490 495  
 Gln Gln Ala Leu Ser Ala Val Lys Gln Gln Arg Lys Gly Lys Leu Ala  
 500 505 510  
 Ala Arg Ile Tyr Glu Lys Thr Gly Ile Arg Val Asp Glu Ser Ser Ile  
 515 520 525  
 Phe Asp Val Gln Val Lys Arg Leu His Ala Tyr Lys Arg Gln Leu Leu  
 530 535 540  
 Asn Val Leu His Ile Met Tyr Leu Tyr Asn Arg Leu Lys Glu Asp Pro  
 545 550 555 560  
 His Phe Ser Ile Tyr Pro Arg Thr Phe Ile Phe Gly Ala Lys Ala Ser  
 565 570 575

19  
Pro Gly Tyr Tyr Tyr Ala Lys Arg Ile Ile Lys Leu Ile His Ser Val  
580 585 590  
Ala Asp Lys Val Asn Asn Asp Lys Gln Thr Asn Glu Gln Leu Lys Val  
595 600 605  
Ile Phe Leu Glu Asn Tyr Arg Val Ser Leu Ala Glu Glu Ile Phe Pro  
610 615 620  
Ala Ala Asp Val Ser Glu Gln Ile Ser Thr Ala Ser Ile Glu Ala Ser  
625 630 635 640  
Gly Thr Gly Asn Met Lys Phe Met Met Asn Gly Ala Leu Thr Leu Gly  
645 650 655  
Thr Leu Asp Gly Ala Asn Val Glu Ile Ala Glu Ala Val Gly Lys Glu  
660 665 670  
Asn Met Phe Leu Phe Gly Leu Thr Ala Glu Glu Val Leu Asn Tyr Tyr  
675 680 685  
Glu His Gly Gly Tyr Arg Ala His Glu Tyr Tyr His His Asp Lys Arg  
690 695 700  
Ile Lys Gln Val Val Asp Gln Leu Val Asn Gly Phe Phe Pro Asp Val  
705 710 715 720  
Ala Asp Tyr Phe Glu Pro Ile Tyr Asp Ser Leu Leu Thr Gln Asn Asp  
725 730 735  
Glu Tyr Phe Val Leu Arg Asp Phe Ala Ala Tyr Thr Glu Ala His Glu  
740 745 750  
Arg Val Glu Ala Ala Tyr Arg Asp Pro Ala Arg Trp Trp Tyr Met Ser  
755 760 765  
Ala Val Asn Ile Ala His Ser Gly Tyr Phe Ala Ser Asp Arg Thr Ile  
770 775 780  
Ala Glu Tyr Ala Val Asp Ile Trp Gly Ile Ser Pro Ser Met  
785 790 795 798

【0103】

【配列番号2】

配列の長さ：29

配列の型：核酸

※鎖の数：一本鎖

30 トポロジー：直鎖状

配列の種類：他の核酸(合成DNA)

\*

配列

CTTGAATTCA CAAGCCTATG AACAGCTGA

29

【0104】

【配列番号3】

配列の長さ：29

配列の型：核酸

※鎖の数：一本鎖

トポロジー：直鎖状

配列の種類：他の核酸(合成DNA)

※

配列

CTTCTGCAGA CTTCTTGACT GGTCCGCAA

29

【0105】

【配列番号4】

配列の長さ：2580

配列の型：核酸

鎖の数：二本鎖

★トポロジー：直鎖状

配列の種類：Genomic DNA

起源

生物名：バチルス ステアロサーモフィラス

★株名：TRBE14

配列

GTTGGCGTCG GTCGCCAAAC CAATATAAAC AACCTATGA ACAGCTGATC AAAAAGGAGG 60

AGCACACGCC TTG TTC ACG GAT AAA GAA ACG TTT AAA CAG CCG TTT TTG ATA 111

Met Phe Thr Asp Lys Glu Thr Phe Lys Gln Ala Phe Leu Ile

1

5

10

21	22
CGG CTT GAA ACG TTG TGC GGC AAA CAG TTC GAG GAG TCG ACG ACG CCG	159
Arg Leu Glu Thr Leu Cys Gly Lys Gln Phe Glu Glu Ser Thr Thr Arg	
15 20 25 30	
GAC CAT TAT TAT GTG CTT GGT CAT ATG GTA CGT GAA CAT ATT ACG CCG	207
Asp His Tyr Tyr Val Leu Gly His Met Val Arg Glu His Ile Ser Arg	
35 40 45	
CAT TGG ATC GCC ACG AAT GAG CCG AAT CCG CCG CAA AAG CCG AAG CAA	255
His Trp Ile Ala Thr Asn Glu Arg Asn Arg Ala Gln Lys Arg Lys Gln	
50 55 60	
GTG TAT TAT TTG TCG ATC GAG TTT TTA TTG GCG CCG TTG CTC GCG ACG	303
Val Tyr Tyr Leu Ser Ile Glu Phe Leu Leu Gly Arg Leu Leu Gly Ser	
65 70 75	
AAC TTA TTA AAC CTT CGT GTC CGT CAG GTC GTT GAA GAG GCG CTT CCG	351
Asn Leu Leu Asn Leu Gly Val Arg Gln Val Val Glu Glu Gly Leu Arg	
80 85 90	
GAT CTC GCG ATT CGT CTT GAA GAT GTC GAG GAG ACC GAG CCG GAT CCG	399
Asp Leu Gly Ile Arg Leu Glu Asp Val Glu Glu Ser Glu Ala Asp Ala	
95 100 105 110	
GGG CTT GCG AAC GCG CGA CTC GCG CCG CTC CCG GCG TGT TTT CTC GAT	447
Gly Leu Gly Asn Gly Gly Leu Gly Arg Leu Ala Ala Cys Phe Leu Asp	
115 120 125	
TCG CTG CCG ACG TTG AAT TTG CCG GCG CAT CCG CAT CCG ATC CCG TAT	495
Ser Leu Ala Thr Leu Asn Leu Pro Gly His Gly His Gly Ile Arg Tyr	
130 135 140	
AAA CAC GCG CTG TTT GAC CAA AAG ATC GTC GAT CCG TAT CAA GTC GAG	543
Lys His Gly Leu Phe Asp Gln Lys Ile Val Asp Gly Tyr Gln Val Glu	
145 150 155	
CTG CCT CAG CAA TGG CTG CCG CAC GGA AAC GTT TGG GAA ATA CGA AAA	591
Leu Pro Gln Gln Trp Leu Arg His Gly Asn Val Trp Glu Ile Arg Lys	
160 165 170	
GAG GAG CTG CCT GTC GAG GTC AAT TTT TGG CCG AAG GTT GAG GTG TAC	639
Glu Glu Leu Ala Val Glu Val Asn Phe Trp Gly Lys Val Glu Val Tyr	
175 180 185 190	
GAA CAA AAC GCG TGC CTC GTC TTC CCG CAT ATC GAC AGC AAA AAA GTG	687
Glu Gln Asn Gly Cys Leu Val Phe Arg His Ile Asp Ser Lys Lys Val	
195 200 205	
ATG CCG GTG CCA TAC GAC ATG CCC GTG ATC CCG TAC CCG ACG AAC ACG	735
Met Ala Val Pro Tyr Asp Met Pro Val Ile Gly Tyr Gly Thr Asn Thr	
210 215 220	
GTC AAT ACG CTG CCG CTT TGG AAC CCG GAG CCG CCG AAA ACG TTC CCG	783
Val Asn Thr Leu Arg Leu Trp Asn Ala Glu Pro Ala Lys Thr Phe Pro	
225 230 235	
CTT CAT AAG GAT GTC ATG CAA TAC AAG CCG GAG ACA GAA GCA ATT TCC	831
Leu His Lys Asp Val Met Gln Tyr Lys Arg Glu Thr Glu Ala Ile Ser	
240 245 250	
GAA TTT TTA TAC CCG GAT GAT CCG CAT GAC GAA CCG AAA ATT TTG CCG	879
Glu Phe Leu Tyr Pro Asp Asp Ala His Asp Glu Gly Lys Ile Leu Arg	
255 260 265 270	
TTG AAG CAG CAA TAT TTT CTC GTG CCG CCG ACG CTT CCG ACG ATC GTG	927
Leu Lys Gln Gln Tyr Phe Leu Val Ala Ala Ser Leu Gly Ser Ile Val	

23	275	280	285	24
CGC GCC CAT CGC CTT CAG CAC GCG AAC CTA CAC CAG CTT CAT GAA TAT				975
Arg Ala His Arg Leu Gln His Gly Asn Leu His Gln Leu His Glu Tyr				
290	295	300		
GTC GCC ATT CAT GTA AAC GAC ACT CAT CCG GTG TTG GCG ATT CCG GAA				1023
Val Ala Ile His Val Asn Asp Thr His Pro Val Leu Ala Ile Pro Glu				
305	310	315		
CTA ATG CGC ATT TTG CTC GAT GAG GAA GCG ATG AGT TGG GAA GAA GCG				1071
Leu Met Arg Ile Leu Leu Asp Glu Glu Gly Met Ser Trp Glu Glu Ala				
320	325	330		
TGG CAC ATT ACG ACC CAT ACG ATC GCT TAC ACA AAC CAT ACG ACG TTA				1119
Trp His Ile Thr Thr His Thr Ile Ala Tyr Thr Asn His Thr Thr Leu				
335	340	345	350	
TCC GAG CGC TTG AGA ATG GCG ATT CAT TTA TTT CAG CCG CTC TTG CCG				1167
Ser Glu Arg Leu Arg Met Ala Ile His Leu Phe Gln Pro Leu Leu Pro				
355	360	365		
CGC ATT TAT ATG ATC GTC GAG GAA ATT AAC GAA CGA TTT TGC CGT GAG				1215
Arg Ile Tyr Met Ile Val Glu Glu Ile Asn Glu Arg Phe Cys Arg Glu				
370	375	380		
CTA TGG GAA CGC TAC CCC GCG GAT TGG GCG CCG ATT GAA CAA ATG CCC				1263
Leu Trp Glu Arg Tyr Pro Gly Asp Trp Gly Arg Ile Glu Gln Met Ala				
385	390	395		
ATT ATC GCC CAT GCG GTG GTG AAA ATG GCG CAT TTG GCC ATC GCC GCG				1311
Ile Ile Ala His Gly Val Val Lys Met Ala His Leu Ala Ile Ala Gly				
400	405	410		
AGC CAT AGC GTC AAC GGA GTG GCG AAG CTG CAT ACA GAA ATT TTG AAA				1359
Ser His Ser Val Asn Gly Val Ala Lys Leu His Thr Glu Ile Leu Lys				
415	420	425	430	
CAG CGG GAA ATG CGC TTG TTT TAC GAA TGG CCG CCG CAC AAG TTT AAC				1407
Gln Arg Glu Met Arg Leu Phe Tyr Glu Trp Ala Pro His Lys Phe Asn				
435	440	445		
AAT AAA ACG AAC GCG GTG ACG CAT CGA CGT TGG CTG TTA AAA GCG AAC				1455
Asn Lys Thr Asn Gly Val Thr His Arg Arg Trp Leu Leu Lys Ala Asn				
450	455	460		
CCC GAG CTG TCG GCG TTG ATT ACC GAC ACG ACC GGT TCG CCG TGG ATT				1503
Pro Glu Leu Ser Ala Leu Ile Thr Asp Thr Thr Gly Ser Arg Trp Ile				
465	470	475		
CAC GAG CCG GAA ACA CTG ATC GAG CTG AAA CCG CAT GCC TCC GAT CCG				1551
His Glu Pro Glu Thr Leu Ile Glu Leu Lys Pro His Ala Ser Asp Pro				
480	485	490		
CGG TTC CAG CAG GCG CTT TCG GCC GTT AAG CAG CAG CCG AAA GCG AAG				1699
Ala Phe Gln Gln Ala Leu Ser Ala Val Lys Gln Gln Arg Lys Gly Lys				
495	500	505	510	
CTC GCT GCC CGC ATT TAT GAA AAG ACC GCG ATC CGT GTT GAT GAG TCG				1647
Leu Ala Ala Arg Ile Tyr Glu Lys Thr Gly Ile Arg Val Asp Glu Ser				
515	520	525		
TCC ATC TTT GAT GTG CAA GTG AAG CCG CTG CAC GCC TAC AAA CGA CAG				1695
Ser Ile Phe Asp Val Gln Val Lys Arg Leu His Ala Tyr Lys Arg Gln				
530	535	540		
CTG TTG AAT GTA CTG CAC ATT ATG TAT CTA TAC AAT CGT CTA AAA GAA				1743

25	26
Leu Leu Asn Val Leu His Ile Met Tyr Leu Tyr Asn Arg Leu Lys Glu	
545 550 555	
GAC CCG CAC TTC TCG ATT TAC CCA CGC ACG TTC ATC TTC GGA CCG AAA	1791
Asp Pro His Phe Ser Ile Tyr Pro Arg Thr Phe Ile Phe Gly Ala Lys	
560 565 570	
CCG TCG CCT GGC TAC TAT TAC GCC AAG CGA ATC ATT AAG CTG ATT CAT	1839
Ala Ser Pro Gly Tyr Tyr Tyr Ala Lys Arg Ile Ile Lys Leu Ile His	
575 580 585 590	
TCG GTT GCC GAT AAG GTG AAC AAT GAC AAA CAG ACG AAC GAG CAG CTC	1887
Ser Val Ala Asp Lys Val Asn Asn Asp Lys Gln Thr Asn Glu Gln Leu	
595 600 605	
AAA GTC ATT TTT TTA GAA AAC TAT CGC GTG TCG CTT GCG GAG GAA ATT	1935
Lys Val Ile Phe Leu Glu Asn Tyr Arg Val Ser Leu Ala Glu Glu Ile	
610 615 620	
TTC CCG GCT GCT GAT GTG AGC GAA CAA ATT TCA ACC CCG AGC ATA GAG	1983
Phe Pro Ala Ala Asp Val Ser Glu Gln Ile Ser Thr Ala Ser Ile Glu	
625 630 635	
CCG TCC GGG ACG GGC AAC ATG AAA TTT ATG ATG AAC CCG CCG CTC ACG	2031
Ala Ser Gly Thr Gly Asn Met Lys Phe Met Met Asn Gly Ala Leu Thr	
640 645 650	
CTC GGA ACG CTC GAT CGA CCG AAC GTC GAA ATC GCT GAA CCG GTC CGA	2079
Leu Gly Thr Leu Asp Gly Ala Asn Val Glu Ile Ala Glu Ala Val Gly	
655 660 665 670	
AAA GAA AAT ATG TTT TTG TTC GCG CTG ACC GCC GAA GAA GTG CTG AAC	2127
Lys Glu Asn Met Phe Leu Phe Gly Leu Thr Ala Glu Glu Val Leu Asn	
675 680 685	
TAC TAC GAA CAC GGC GGT TAC CCG CCG CAT GAA TAT TAC CAC CAC GAC	2175
Tyr Tyr Glu His Gly Gly Tyr Arg Ala His Glu Tyr Tyr His His Asp	
690 695 700	
AAA CCG ATT AAA CAA GTG GTC GAT CAA CTT GTG AAC CCG TTT TTC CCT	2223
Lys Arg Ile Lys Gln Val Val Asp Gln Leu Val Asn Gly Phe Phe Pro	
705 710 715	
GAT GTT GCT GAT TAC TTT GAG CCG ATT TAC GAC TCC TTG CTG ACG CAA	2271
Asp Val Ala Asp Tyr Phe Glu Pro Ile Tyr Asp Ser Leu Leu Thr Gln	
720 725 730	
AAC GAC GAA TAT TTC GTT CTG CCG GAC TTT GCC GCT TAT ACC GAA CCG	2319
Asn Asp Glu Tyr Phe Val Leu Arg Asp Phe Ala Ala Tyr Thr Glu Ala	
735 740 745 750	
CAT GAG CCG GTG GAG CCC GCT TAC CCG GAC CCG GCA CCG TGG TGG TAT	2367
His Glu Arg Val Glu Ala Ala Tyr Arg Asp Pro Ala Arg Trp Trp Tyr	
755 760 765	
ATG ACC CCG GTC AAC ATC CCG CAC TCC GGC TAC TTT GCA ACC GAC CCG	2415
Met Ser Ala Val Asn Ile Ala His Ser Gly Tyr Phe Ala Ser Asp Arg	
770 775 780	
ACG ATC GCC GAG TAC CCC GTC GAT ATT TGG GCG ATT TCA CCA TCG ATG	2463
Thr Ile Ala Glu Tyr Ala Val Asp Ile Trp Gly Ile Ser Pro Ser Met	
785 790 795 798	
TGAGGCCAAAA GCAAAATCAA GCGCGTTCC GCACCAGTCA AGAAGTTTGG TGAATCAGCG	2523
TTGCTGACCT TGATTGGCG GCAACGGCAT GAACAGAAAA GAGACGTTCT GAACCAA	2580

【図面の簡単な説明】

50 【図1】ホスホリラーゼを用いたG-1-Pの生成、および



サイクロアミロース生成の概念を示す模式図である。

【図2】(a)はバチルスサチルス由来のグリコーゲン合成系遺伝子群を示し、(b)はバチルスステアロサーモフィラスTRBE14株由来のグリコーゲン合成系遺伝子群を示す。


【図3】精製した耐熱性ホスホリラーゼをSDSポリアクリルアミドゲル電気泳動した結果を示す。

【図4】耐熱性ホスホリラーゼの至適pHを示したグラフである。

【図5】耐熱性ホスホリラーゼのpH安定性を示したグラフである。


\*

【図1】

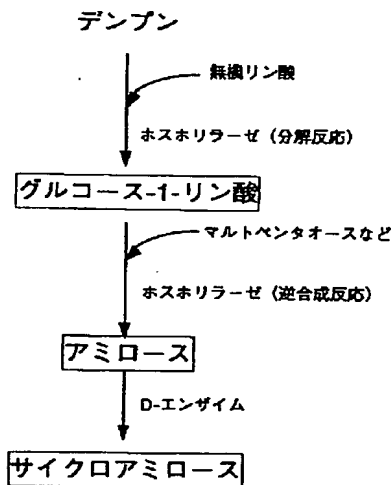


【図3】

耐熱性ホスホリラーゼのSDS-ポリアクリルアミドゲル電気泳動

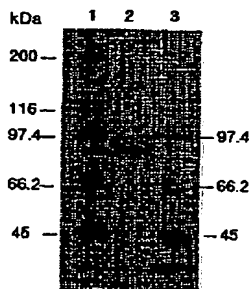


レーン1: 分子量マーカー  
レーン2: 耐熱性ホスホリラーゼ  
レーン3: 分子量マーカー


【図2】

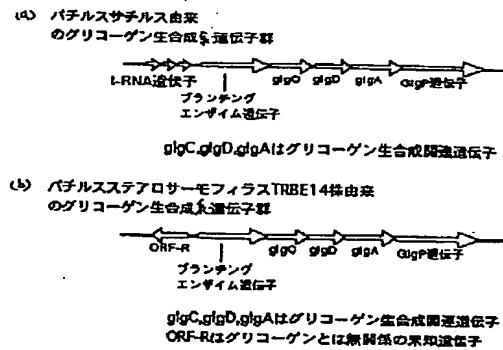


【図4】

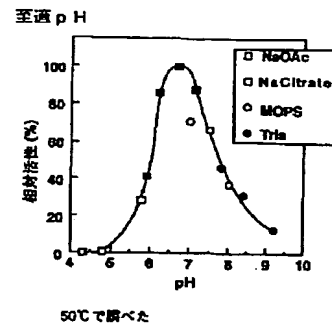


【図7】

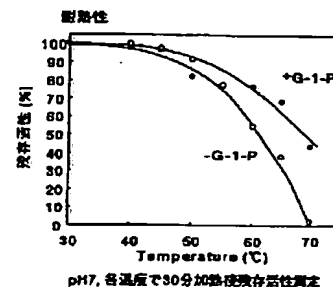


【図5】

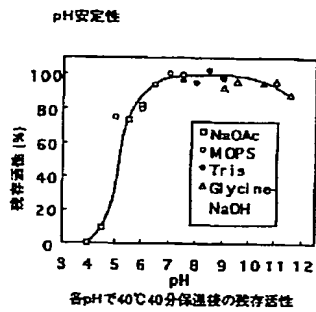


【図6】

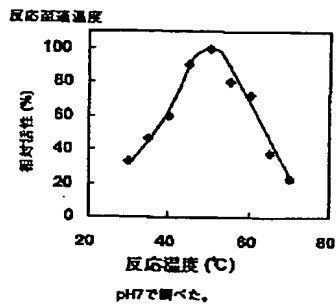

【図8】

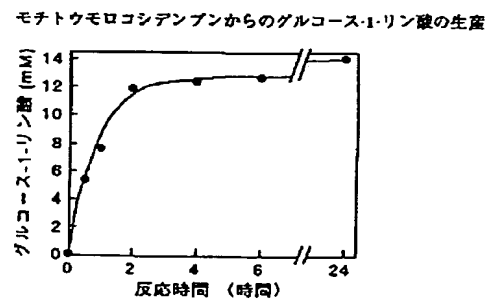

【図9】

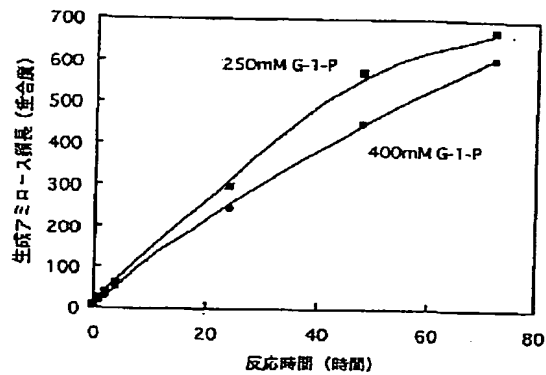

フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>  
C12R 1:19)

識別記号 片内整理番号

F I

技術表示箇所